




TUBO CON ADAPTADOR 1211

INSTRUCCIONES DE USO

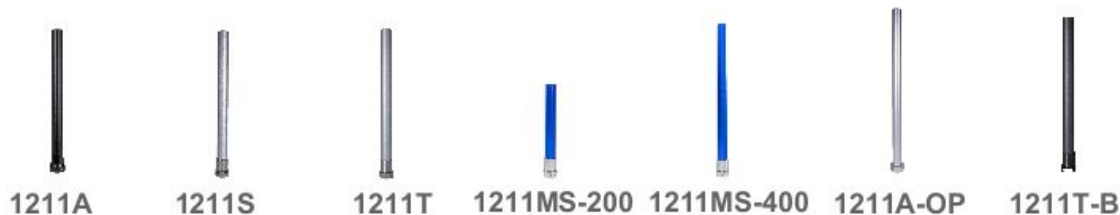

1. DESCRIPCION Y APLICACIONES

- * Este adaptador es exclusivamente para adaptaciones de prótesis de extremidades inferiores.
- * Conecta cualquier sistema de pirámide a una abrazadera de tubo.
- * Los cuatro tornillos de ajuste aseguran el sistema que se acopla y permiten la alineación angular.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	MATERIAL	ALTURA MONTAJE	PESO COMPONENTE	PESO MAX USUARIO
1211A	ALUMINIO	400 mm	320 g	158 Kg
1211S	ACERO	400 mm	344 g	136 Kg
1211T	TITANIO	400 mm	306 g	170 Kg
1211MS-200	ACERO	200 mm	201 g	90 Kg
1211MS-400	ACERO	400 mm	320 g	90 Kg
1211A-OP	TITANIO	400 mm	280 g	114 Kg
1211T-B	TITANIO	400 mm	306 g	170 Kg

Par de apriete recomendado: Siempre aprieta los tornillos de alineación cruzados

Par de apriete del tornillo de alineación M8:

(Aluminio): 10 Nm

(Titanio/Acero inoxidable): 15 Nm

Bloqueador de rosca: Aplica Loctite una vez que la alineación y la conexión estén finalizadas

PRECAUCIÓN: No aprietes el tubo en un tornillo de banco ni en un dispositivo similar, ya que esto puede dañar el tubo

3. Seguridad y Medio Ambiente

Rango de temperatura: Entre -20°C y 80°C (-4°F a 176°F).



Enjuagar con agua limpia si se expone a líquidos salados, clorados o potencialmente corrosivos.

Almacenamiento: Guardar a temperatura ambiente; evitar ambientes húmedos, muy calientes o extremadamente fríos.

Garantía: 2 años, siempre que se use según lo previsto sin modificaciones y únicamente por el usuario original.

No reutilizar en otra prótesis.



Conformidad: Este producto cumple con los requisitos del Consejo de la UE 2017/745 (MDR) para productos médicos. Este producto ha sido clasificado como un producto de clase I según los criterios de clasificación indicados en el anexo IX de las directrices. Por favor, guarda este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

1211 IFU REV. C (9-30-2026)

Specifications subject to change.



CORPORATE OFFICE
2691 Saturn Street | Brea, CA 92821
Tel: (714) 524-0663 | Fax: (714) 364-8113

ST&G CORPORATION
Rm. 911 43, Yangsan-ro
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea



Schiffgraben 41 | 30175 Hannover, Germany

